

## MANUAL DE UTILIZARE

**Notă:** Poza este doar pentru referință, vă rugăm să consultați produsul din pachet.

Pătura electrică este un dispozitiv electric. Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare.

### Utilizarea:

1. Conectați pătura termică cu cablul de alimentare, apoi conectați-o la priză. Apăsăți butonul **ON/OFF** pentru a porni controlerul. Ecranul LCD va afișa pornirea dispozitivului. Controlerul poate seta două funcții:  
a) Funcția de reglare a temperaturii, vezi **TEMP** de pe controler;  
b) Funcția de sincronizare, vezi **TIME** de pe controler.
2. Pentru a porni funcția de încălzire, vă rugăm să apăsați scurt **TEMP +**. Pătura electrică va intra în modul de creștere a temperaturii. Apăsăți scurt **TEMP-**, pătura electrică va intra în modul de scădere a temperaturii. Temperatura implicită când controlerul este pornit este de 45°C. Intervalul de setare a temperaturii păturii electrice este: 38°C - 55°C.
3. Pentru a porni funcția de temporizare, vă rugăm să apăsați **TIME** pentru a selecta nivelul de temporizare. Intervalul de temporizare a păturii termice este: 2 ore - 4 ore - 6 ore - 10 ore.

### Temperatura păturii electrice:

Setare	Temperatură	Mesaj pe ecran
1	38°C	38
2	42°C	42
3	45°C	45
4	48°C	48
5	52°C	52
6	55°C	55

### Specificații:

Dimensiuni: 180cm x 150cm  
Alimentare: 220V - 55Hz

### Precauții:

1. Această pătură electrică este concepută pentru oameni, nu pentru animale de companie!
2. Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza pătura electrică.
3. Pătura electrică este concepută numai pentru uz interior.
4. Dacă există vreo deteriorare vizibilă a păturii electrice (fisuri, rupturi sau fire și elemente de încălzire expuse), vă rugăm să nu utilizați produsul.
5. Dacă temperatura este prea ridicată sau apare miros de arsură în timpul utilizării, vă rugăm să nu utilizați pătura electrică. Aceasta trebuie oprită și scoasă imediat din priză.
6. Pacienții cu boli cardiace severe, pacienții care trebuie să poarte stimulator cardiac și femeile însărcinate trebuie să consulte un medic înainte de utilizare.
7. Vă rugăm să nu faceți nicio modificare asupra controlerului, suprafeței produsului și elementelor de încălzire cu care este echipat produsul în sine.
8. Nu perforați și nu folosiți obiecte ascuțite pentru a fixa pătura electrică.
9. Nu utilizați alte controlere cu acest produs.
10. Nu folosiți pătura electrică când este udă.
11. Nu folosiți pătura electrică pentru a călca pe ea.
12. **Nu folosiți pătura electrică când este pliată.**
13. Nu introduceți știfturi și nu folosiți obiecte ascuțite pentru a tăia sau a lovi pătura electrică. Nu folosiți știfturi sau alte obiecte metalice pentru a fixa produsul.
14. Persoanele care nu se pot îngriji, persoanele care nu sunt sensibile la căldură, sugarii și copiii mici nu au voie să folosească produsul.

15. Nu expuneți la soare, nu introduceți în cuptor și nu călcați produsul, pentru a evita deteriorarea elementelor de încălzire.

16. Nu utilizați pătura electrică cu alte echipamente de încălzit (sticle de apă caldă, saltea cu infraroșu, etc.). Totodată este interzisă încălzirea altor dispozitive cu pătura electrică.

17. Cei care consumă excesiv alcool, suferă de oboseală, precum și cei care iau sedative ar trebui să utilizeze produsul sub stricta îngrijire medicală însoțitoare.

18. Nu așezați pătura electrică între două straturi de vată (pilot) sau sub vată (pilotă) pentru a evita supraîncălzirea produsului.


### Curățarea păturii termice:

1. Opriți mai întâi controlerul și deconectați-l de la priză.
2. Scoateți conectorul controlerului de la cupla păturii electrice.
3. Produsul poate fi spălat la mașină sau de mână. După spălare, asigurați-vă că utilizați produsul doar când este complet uscat.
4. Nu utilizați detergenți chimici.
5. Pentru a prelungi durata de viață a produsului, vă rugăm să puneți produsul într-o pungă de rufe înainte de spălarea la mașină și să utilizați cea mai blândă viteză de spălare.

### Întreținerea și depozitarea produsului:

Când produsul nu este utilizat, opriți controlerul, deconectați priza și depozitați produsul într-un loc uscat, sigur, curat și răcoros.

Păstrați ambalajul și instrucțiunile de transport în cazul în care dispozitivul dumneavoastră are nevoie de service. Dacă produsul este returnat pentru reparație fără ambalajul original, pot apărea deteriorări și pot anula garanția.

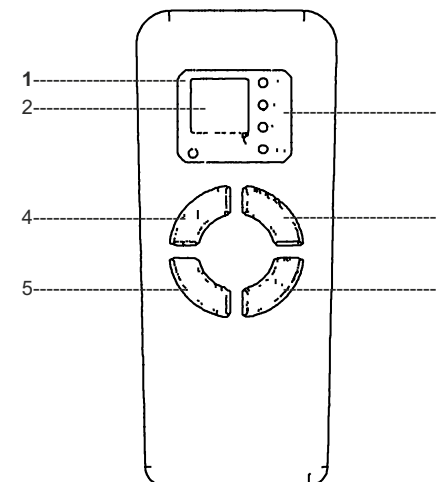

### Controlerul:

- 1 - Ecranul LED
- 2 - Indicatorul de temperatură
- 3 - Indicator de temporizare
- 4 - Buton **TEMP+**
- 5 - Buton **TEMP-**
- 6 - Buton **TIME**
- 7 - Buton **ON/OFF**